



Návod k použití

## BOOSTER PRO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### Hlavní technická příručka

#### 6-in-1 BOOSTER PRO

BOOSTER PRO je zařízení na vyhlazení pleti se šesti klíčovými funkcemi, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů v oblasti pokožky. Toto revoluční zařízení přináší viditelné zlepšení, co se týče zářivosti, objemu, pružnosti, zjemnění porů a sonických vibrací.



#### Využijte svůj BOOSTER PRO na maximum

Stáhněte si aplikaci AGE-R zdarma, a používejte AGE-R BOOSTER PRO profesionálnějším a pohodlnějším způsobem.  
\*Naskenujte QR kód, nebo v obchodě s aplikacemi vyhledejte „AGE-R“.

### Informace o produktu

#### Návod k použití

- Pro zapnutí produktu stiskněte a podržte tlačítko ❸ Power na dobu 2-3 sekund. Po zapnutí napájení se zvukovým efektem ON rozsvítí ❷ LCD obrazovka a automaticky se nastaví režim Booster na úroveň 1.
- Pro volbu požadovaného režimu jednou krátce stiskněte tlačítko režimu ❹ Mode. Při každém stisknutí tlačítka režimu Mode ❹ se režim zobrazí na obrazovce LCD ❷ a při každé změně režimu se, spolu s hlasovým průvodcem režimu, na barevném displeji LED ❸ zobrazí barva LED, specifická pro režim.  
\*Režimy se mění v následujícím pořadí:  
Režim Booster → Režim MC → Režim Derma Shot → Režim Air Shot
- Po nastavení režimu krátce stiskněte tlačítko Level ❸ pro nastavení úrovně. S každým stiskem tlačítka se úroveň zvýší o jednu, a upravená úroveň se zobrazí na obrazovce LCD ❷. \*Můžete nastavit úroveň 1 až 5, a při prvním použití se doporučuje začít s úrovní 1.

- Jakmile nastavíte režim a úroveň, použijte produkt podle konkrétních pokynů pro každý režim. Před použitím se nezapomeňte seznámit s pokyny pro každý režim.
- Během používání bude doba použití oznamována každou minutu. Pokud produkt používáte déle než 5 minut, na displeji LCD ❷ se zobrazí obrazovka čekání na změnu režimu, spolu s oznámením o dokončení. Pokud během 10 sekund nestisknete žádné tlačítko nebo neprovedete nějakou operaci v aplikaci, přístroj se automaticky vypne. Chcete-li použít další režim, jednou za 10 sekund krátce stiskněte tlačítko režimu ❹ a režim změníte.
- Pro hygienické použití nezapomeňte po použití hlavu ❶ důkladně vyčistit suchým hadříkem nebo bavlněnou podkožkou, a uložte ji.
- Nabíjení provádějte připojením přiložené nabíječky typu C k nabíjecímu portu ❸ na spodní zadní straně produktu.  
\*Během nabíjení se na ❷ LCD obrazovce zobrazí stav nabíjení, spolu se zvukem připojení nabíjení, a produkt nebude fungovat.

01

### Opatření během používání a skladování

#### Opatření během použití

- Dbejte na to, abyste zařízení neupustili nebo s ním nepraštili, protože by to mohlo způsobit poruchu nebo poškození.
- Dbejte na to, aby dovnit hlavní jednotky nepronikla voda ani kosmetika.
- Pokud produkt nefunguje správně, nerozebírejte jej a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Ostrahujte veškeré kovové příslušenství na těle uživatele.
- Zařízení nepoužívejte spolu s elektrickými spotřebiči, jako jsou elektrické zahřívací podkožky.
- Zařízení nepoužívejte na horkých místech, jako je v blízkosti ohně nebo na přímém slunečním světle, a hlavní jednotku nebo kabel neponěchávejte v blízkosti topných zařízení.
- Během používání neponěchávejte zařízení déleš dobu pracovat v jedné oblasti; nezapomeňte s ním neustále pohybovat.
- Při používání zařízení buďte opatrní, protože pokud přijde do styku s jinými produkty, může dojít k poruše.
- Zařízení nepoužívejte pro jiné účely, než k původnímu účelu; mohlo by dojít k nehodám.
- Toto zařízení nepoužívejte, pokud pravidelně trpíte paralýzou nebo máte potíže s vyjadřováním.
- Hlavou, která se přichází do kontaktu s pokožkou, neklepejte přímo na tvrdé plochy; protože by mohlo dojít k nehodám.
- Hlavní jednotku nebouchajte do tvrdých předmětů.
- Zařízení nepoužívejte při vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo v prašném prostředí, například v koupelnách, kuchyních a horkých autech.
- Při používání dodržujte odstup od elektrických spotřebičů, například jiných kosmetických přístrojů, televizorů a rádů.
- Nepoužívejte v uzavřené oblasti, na zraněních nebo v oblastech, kde byly provedeny zákroky nebo operace.
- Zařízení nepoužívejte při jiném, než jmenovitém napětí. Použití tam, kde je jmenovitá hodnota překročena, může způsobit přehřátí přístroje, které může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- S mokrou rukou se zařízením nemanipulujte, ani neodpojujte nabíjecí kabel; může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se hlavní jednotku opravit, rozebrat nebo upravit sami; mohli byste způsobit poruchy.
- Během nabíjení nebude zařízení fungovat.
- Pro správný kontakt s pokožkou držte hlavní část zařízení pevně.
- Abyste bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát, musí být děti pod dohledem.
- Tento spotřebič nesmí být používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jímž nebyl zajištěn dohled nebo instrukce.

#### Opatření pro skladování

- Skádejte mimo dosah dětí a v místě bez vlhkosti.
- Neskládejte na místech, kde se vytváří magnetická pole nebo elektromagnetické vlny; mohly by způsobit poruchy.
- Pro použití vyčistěte hlavu vlněným ubrouskem, čistým hadříkem nebo měkkým ručníkem, a zařízení skladujte v suchu.
- Před učištěním se ujistěte, zda je zařízení vypnuto.
- Pro čištění nepoužívejte hořlavé látky, jako je benzin nebo benzen, protože mohou způsobit chemické reakce, změnu barvy a deformaci.

#### Upozornění pro uživatele

Pokud trpíte špatným zdravotním stavem, konzumovali jste alkohol, v současné době užíváte prášky na spaní, jste unavení nebo jste pod lékařským dohledem, zařízení nepoužívejte. Pokud během používání pociťte bolest nebo neobvyklé příznaky, okamžitě používání přerušete.

**Opakované použití zařízení na stejném místě nebo nesprávné použití může způsobit poškození kůže. Pokud se na kůži objeví jakákoliv abnormalita, postižené místo ochlaďte a okamžitě vyhledejte lékaře.**

\*Při pravidelném používání mohou osoby s citlivou pokožkou zažít mírné zarudnutí.

Přičlivě si přečtěte pokyny a bezpečnostní opatření, a proveďte řádnou následnou péči.

#### Zařízení nepoužívejte, patřte-li do následujících skupin:

- Osoby s příznaky zarudnutí a píchání v důsledku nadměrného opalování
- Osoby s alergiemi, zejména ti s citlivou pokožkou
- Osoby, které používají elektronická zařízení, nošená přímo v těle, jako jsou kardiostimulátory
- Osoby, které používají elektronické zdravotnické prostředky na podporu života, jako jsou kardiopulmonální přístroje
- Osoby, které používají implantované elektronické zdravotnické prostředky, jako jsou elektrokardiografické přístroje
- Osoby, které po delší dobu užívají hormonální léky na bázi steroidů
- Osoby s poruchami jaterních funkcí, které mají v oběhovém systému příznaky cévních dilačních syndromů

02

- Osoby, které podstupují ambulantní léčbu
- V oblastech se zarostlým krmí
- V oblastech s dermatitidou, způsobenou kosmetikou nebo jedincí s atopickou dermatidou
- Oblasti s nedokonalostmi, které doprovází svědění, nebo oblasti s nedokonalostmi, způsobenými fyzickým podrážděním
- Oblasti s kovovými, plastovými, silikonovými nebo jinými cizími předměty v těle
- Pacienti s poruchami kve, srdečními chorobami, akutními chorobami, krevními chorobami, zhoubnými nádory, zlomeninami, infekčními chorobami, na oční vřívka, oblasti s traumatické, lebeční oblasti a na malých dětech, těhotných ženách, kojících ženách a starších osobách
- \*Tento produkt je určen pouze pro kosmetické použití. Tento produkt není určen pro diagnostiku, léčbu, ošetření nebo prevenci jakékoli nemoci. Před použitím si přečtěte všechny pokyny a varování. Používejte jen podle pokynů.
- Máte-li jakékoli zdravotní problémy nebo onemocnění, před použitím zařízení se vždy poraďte se zdravotnickým odborníkem.

#### Technické údaje

**Název modelu:** ME-BPRO-K **Název produktu:** MEDICUBE AGE-R BOOSTER PRO  
**E-mailová adresa:** medicube\_eurcs@apr-in.com  
**Výrobce:** APR Factory Co., Ltd.  
**Adresa:** 2nd Floor, 107 Gasan Digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, South Korea (Gasan-dong) 50, Wonsokjeongyongso-gil, Posing-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  
**Registrační číslo certifikace KC R-R-pg1-ME-BPRO**  
**FCC ID Number:** 2AC7Z-ESPS3WROOM1  
**Určený účel použití:** Masážní zařízení pro krásný obličej

#### Specifikace baterie

**Indikace kvality v souladu se zákonem o kontrole bezpečnosti elektrických spotřebičů a spotřebních výrobků č. YU101535-23001**  
**Název modelu:** DTP18650-26F  
**Název produktu:** Baterie (Válcová Li-ion dobíjecí baterie) **Jmenovité napětí:** 3.7 V / 2,600 mAh  
**Název výrobce:** Shenzhen Data Power Technology Ltd. **Země výroby:** Čína  
**Datum výroby:** Je uvedeno samostatně na dně produktu

#### Technické údaje výrobku

**Velikost produktu:** 34\*177.3mm **Vstupní napětí:** DC 5V / 2A (USB-C)  
**Baterie:** Lithium-iontová. 3.7 V / 2,600 mAh **Spotřeba energie:** max. 1.8 Watt (3.7 V x 0.5 A)  
**Hmotnost:** 155 g. **Doba nabíjení:** Přibližně 4 hodiny  
**VÝROBENO V KOREJI**

**Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Jeho provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:**  
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nechtěný provoz.



Tento přístroj byl testován a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení slouží k zajištění dostatečné ochrany před nežádoucím rušením při použití zařízení v obytných prostorách. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. V případě neuposlechnutí pokynů výrobce ohledně jeho instalace a použití může docházet k rušení radiokomunikace. Není nicméně možné zajistit, že v konkrétních instalacích k rušení docházet nebude. Pokud i po vypnutí a opětovném zapnutí způsobuje zařízení škodlivé rušení přijmu rozhlasu nebo televize, doporučujeme zkusit jej odstranit jedním z níže uvedených způsobů:

- Změnou orientace nebo přemístěním přijímač antény.
- Zvýšením vzdálenosti mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojením zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátit se na prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

#### Upozornění na FCC:

Změny a úpravy, které nebyly výslovně schváleny osobou odpovídající za udělení shody s předpisy, mohou zneplatnit oprávnění uživatele pro práci se zařízením.

03

### Výměna / vrácení zboží

#### 1. Záruka

Pro všechna zařízení Age-R nabízíme 2 roky omezené záruky od data původního nákupu. Pokud zařízení nefunguje správně kvůli vadě výrobce, vadné zařízení bezplatně vyměníme do 2 let. Tato záruka se nevztahuje na zařízení, poškozené: 1) Při nehodě, nesprávném použití nebo opravě 2) Použití s neautorizovaným příslušenstvím, nebo jiné než předepsané použití. 3) Připojením k nesprávnému proudu a napětí (poskytujeme jen kabel typu USB C) Tato záruka se produkuje pouze v případě, že jsou zařízení používána s autorizovaným příslušenstvím zařízení (například s přiloženými nabíjecími kabely).

#### 2. Vratky

U zařízení Age-R musí být všechny vrácení požadovány prostřednictvím místa nákupu do 30 dnů od data nákupu. Vrazení a výměny z důvodu změny názoru jsou přijímány pouze u neotevřených a nepoužitých produktů, přičemž náklady na zpětné zasílání hradí zákazník. V případě závad nebo počátečních poruch během používání kontaktujte místo nákupu pro další pomoc.

### Doporučený způsob likvidace a nabíjení lithiové baterie

**Varování:** Protože může existovat nebezpečí, jako je přehřátí, požár a výbuch, dodržujte následující pokyny. **1) Na manipulaci záleží.** Pokud vizuálně identifikujete nafouklé baterie, může to znamenat nebezpečí, a okamžitě kontaktujte výrobce nebo prodejce. Používejte pouze určenou nabíječku. Chraňte před ohněm (nedávejte do mikrovlnné trouby). V létě ji nenechávejte v autě. Neskládejte, ani nepoužívejte při vysokých teplotách a na vlhkých místech, například v sauně. Produkt nepoužívejte po dlouhou dobu, pokud je položen na přikryvce, elektrické podložce nebo koberci. Pokud necháte zapnuté napájení, neskládejte v těsném prostoru. Vyvarujte se kontaktu elektrického terminálu s kovovými produkty, například s náhradek, mincemi, klíčem a hodinkami. Použijte náhradní lithiovou baterii, zaručenou výrobcem. Nesnažte se baterii rozbit, dít ani probodnout. Vyvarujte se abnormálních nárazů, například pádům z výšky. Nevystavujte teplotě nad 50 °C. Vyvarujte se vlhkosti.

**2) Pokyny pro likvidaci.** Výbodu baterii nelikvidujte podle vlastního uvážení. Baterii při likvidaci nezapalujte ani ji neválejte do ohně. V důsledku šráru může dojít k výbuchu a požáru. Způsob likvidace baterie se může lišit v závislosti na zemích a oblastech. Zlikvidujte ji vhodným způsobem.

**3) Doporučení, týkající se způsobu nabíjení.** Baterii nenabíjejte jiným způsobem, než je uvedeno v uživatelské příručce. Může dojít k požáru nebo výbuchu.

#### Doba kompletního nabití: Přibližně 4 hodiny


\*Doba nabíjení se může lišit v závislosti na množství zbytkové energie v baterii nebo na okolní teplotě nebo prostředí nabíjení. Pro zlepšení výkonu může bez předchozího upozornění dojít ke změnám ve specifikacích a vnějším vzhledu.

Přečtěte si uživatelskou příručku a pokyny.  
Obrázky v příručce jsou pouze pro demonstrační účely.

Copyright © srpen 2024, APR Corp.  
Všechna práva vyhrazena.

medicube.us

04

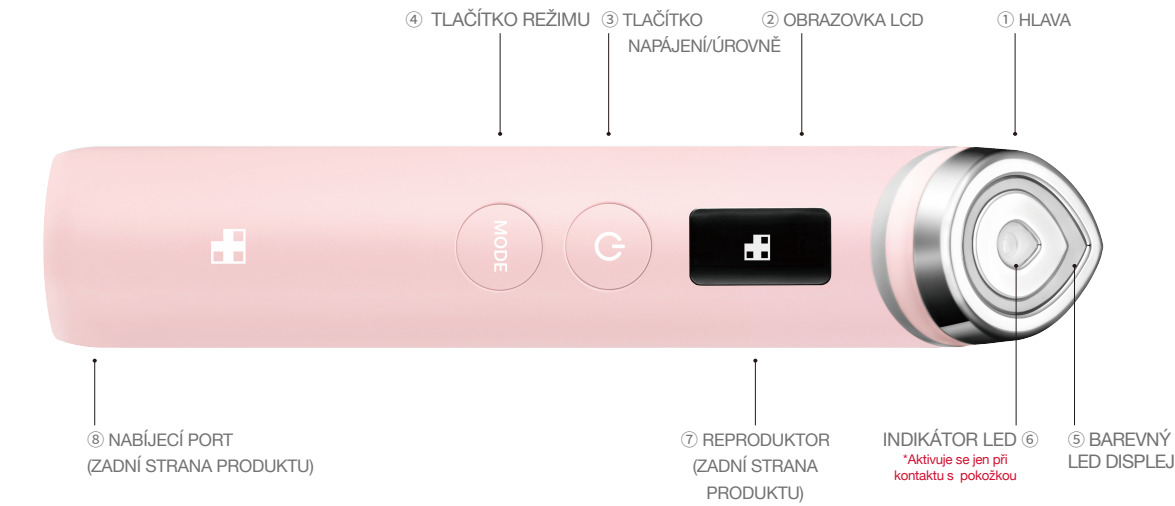

05

## Přehled hlavního režimu

Před použitím se nezapomeňte seznámit s metodami použití a s doporučenými frekvencemi pro každý režim.

**REŽIM BOOSTER | Oranžová LED**



**Režim zesílení jasu**  
Přejíždáním po kůži lze použít s různými typy kosmetických přípravků a pleťových masek.  
**Doporučená frekvence** 1-3x denně (5-10 minut na jedno použití)  
**Pokyny k použití**  
Aplikujte produkt na péči o pleť, a přístroj použijte pohybem zespodu nahoru směrem od vnitřní k vnější straně obličeje.

**REŽIM DERMA SHOT | Červená LED**



**Režim Elasticity Derma Shot**  
Lze používat s různými typy kosmetických přípravků a pleťových masek pro uvolnění obličejových svalů.  
**Doporučená frekvence** 1-3x denně (5-10 minut na jedno použití)  
**Pokyny k použití**  
Naneste přiměřené množství přípravku pro péči o pleť, a pomalu pohybujte přístrojem po pokožce. Ve svalových bodech udělejte dvousekundovou pauzu na uvolnění svalů.

**REŽIM MC | Zelená LED**



**Režim Line MC**  
Je možno použít s přípravky na péči o pleť a s pleťovými maskami pro zvláštění objemu vzhledu linek.  
**Doporučená frekvence** 1-3x denně (5-10 minut na jedno použití)  
**Pokyny k použití**  
Aplikujte produkt na péči o pleť, a přístroj použijte pohybem zespodu nahoru směrem od vnitřní k vnější straně obličeje.

**REŽIM AIR SHOT | Červená LED**



**Režim Pores Air Shot**  
Lze použít na suchou pokožku, pro péči o póry a odumřelé kožní buňky.  
**Doporučená frekvence** 2-3x denně (5 minut na jedno použití)  
**Pokyny k použití**  
Po vyčištění a vysušení pokožky jemně přejíždějte okrajem hlavy po obličeji.

06

## Sekvence režimů

\*Pokud jsou ve stejný den používány různé režimy, doporučujeme postupovat podle této sekvence.



## INDIKACE LED

\*Barvy LED pro každý režim jsou přednastaveny, a změny barev LED lze provádět pouze prostřednictvím aplikace AGE-R.



## Součásti produktu

Hlavní jednotka, nabíjecí kabel USB, uživatelská příručka

## Opatření před použitím

\*Při prvním použití začnete s nejnižším nastavením, které během používání podle potřeby upravte.



**Zakázané oblasti použití**  
Nepoužívejte v uvolnění oblasti, na otevřené rány nebo v oblastech, kde byly provedeny zákroky nebo operace.



**Doporučené oblasti pro použití s nízkými úrovněmi**  
V citlivých oblastech, jako jsou oči, nos a ústa, doporučujeme použití nízkých úrovní.




**Frekvence používání**  
Pro každý režim použijte doporučenou frekvenci.

07

## Pokyny pro připojení Bluetooth

\*Ujistěte se, zda je Bluetooth vašeho smartphonu zapnutý, a BOOSTER PRO je zapnutý pro párování.

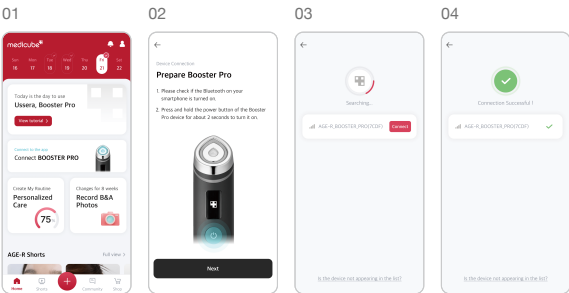

- 01 Otevřete aplikaci AGE-R a klikněte na možnost „Connect BOOSTER PRO“.
- 02 Zapněte Bluetooth ve svém smartphonu a zapněte BOOSTER PRO.
- 03 Po potvrzení detekovaného zařízení klikněte na ikonu „Connect (Připojit)“.
- 04 Zkontrolujte, zda je obrazovka „Connection Successful (Připojení úspěšné)“ zobrazena správně, a zda v aplikaci BOOSTER PRO zazní zvuk připojení Bluetooth.

## Opatření při připojení přes Bluetooth

01. **Dálkové ovládání**
  - Funkce dálkového ovládání funguje pouze při připojení k zařízení, a funkce, jako je změna barvy LED, ovládání hlasitosti a zapnutí/vypnutí vibrací, jsou dostupné jen v rámci funkce dálkového ovládání po připojení Bluetooth.
  - Nastavení úrovně hlasitosti a nastavení vibrací ON/OFF, které nakonfigurujete v dálkovém ovládání, budou uloženy jako výchozí hodnoty, ale změny barev LED uloženy nebudou.
02. **Automatické zprávy**
  - Historie používání, je-li zařízení používáno bez připojení k aplikaci, se dočasně ukládá v zařízení, a po připojení se automaticky nahraje do zpráv aplikace.
  - Úroveň intenzity a barvy LED, specifické pro daný režim, jsou ve zprávě uloženy jako nejdelší použitá úroveň a barva.
03. **Výchozí změny barev LED pro každý režim**
  - Změna výchozí barvy LED pro každý režim je možná pouze při připojení zařízení, a lze ji provést na kartě „Settings (Nastavení)“.
04. **Připojení zařízení selhalo**
  - Ujistěte se, zda není zařízení připojeno k jinému smartphonu. Je-li k jinému smartphonu připojeno, odpojte je od aplikace připojeného smartphonu tím, že přejdete na [Banner BOOSTER PRO] → [Settings (Nastavení)] → [Device Disconnect (Odpojit zařízení)], a zkuste to znovu.
05. **Přepnutí na jiný smartphon**
  - Pokud chcete zařízení připojit k jinému smartphonu, nejprve spusťte aplikaci na aktuálně připojeném smartphonu. Přejděte na [Banner BOOSTER PRO] → [Settings (Nastavení)] → [Device Disconnect (Odpojit zařízení)], odpojte jej a zkuste připojit k novému smartphonu.



**Dostupné pouze v případě, že je Bluetooth párován**

- Změny barev, specifické pro režim
- Sonické vibrace ZAP/VYP
- Ovládání hlasitosti
- Kontrola zpráv o péči

08

## Přehled obrazovky LCD




**Výchozí obrazovka**

- 1 Indikátor Bluetooth
- 2 Indikátor baterie
- 3 Bluetooth je odpojen
- 4 Zbývající kapacita baterie
- 5 Rozhraní Bluetooth je připojeno
- 6 Vybitá baterie (\*Výžaduje nabití)
- 7 Aktuální režim použití
- 8 Úroveň intenzity
- 9 Doba péče



**Obrazovka nabíjení**

- 1 Obrazovka nabíjení Je zobrazena zeleně, čímž vám umožňuje sledovat stav nabíjení. (\*Nefunguje během nabíjení)
- 2 Obrazovka plného nabití

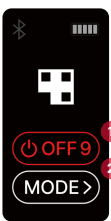

**Obrazovka při čekání na změnu režimu po 5minutové péči**

- 1 Odpočítávání automatického vypnutí
- 2 Není-li provedena žádná operace s tlačítky, po 10 sekundách se automaticky vypne.
- 3 Pokyny pro dodatečnou péči Tlačítko MODE a ovládání aplikace je možno použít k přepnutí do jiného režimu.



**Obrazovka vybité baterie**

- 2 Obrazovka vybité baterie Je-li baterie vybitá, zobrazí se červeně jako indikátor, že je vyžadováno nabití.

09